

ELGYDIUM CLINIC

Forschung und Engagement für die Zahn- und Mundgesundheit

INNOVATION

In Heimanwendung die Bakterien beseitigen:


Sterilisation der **ELGYDIUM CLINIC**-Zahnbürsten in der Mikrowelle

Um sich während der Wundheilung nicht immer wieder selbst mit den eigenen Bakterien neu anzustecken, und für eine einwandfreie Mundhygiene, hat Pierre Fabre ORAL CARE ein exklusives Sterilisationsverfahren entwickelt.

Exklusives Verfahren: den **ELGYDIUM CLINIC**-Zahnbürsten vorbehalten

Mit beiden **ELGYDIUM CLINIC**-Zahnbürsten möglich

Einfach die **ELGYDIUM CLINIC**-Zahnbürste, mit dem Kopf in Wasser tauchend, **1 Minute** lang bei **mindestens 600 W** in die **Mikrowelle** stellen, um die **Mundflora-Ablagerungen** darauf um **99,99 % zu reduzieren**.*

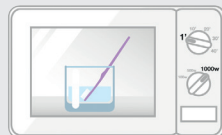

Vorgehensweise:

- 1** Reinigen Sie Ihre **ELGYDIUM CLINIC**-Zahnbürste kurz unter fließendem Wasser.
- 2** Legen Sie die Zahnbürste, Kopf voran, in ein Glas und füllen Sie es mit Wasser auf, bis der Zahnbürstenkopf vollständig von Wasser bedeckt wird.
- 3** Stellen Sie das Glas bei mindestens 600 W für 1 Minute in die Mikrowelle.
- 4** Lassen Sie das Glas kurz abkühlen, ehe Sie es aus der Mikrowelle holen.
- 5** Nehmen Sie die **ELGYDIUM CLINIC**-Zahnbürste aus dem Glas heraus und warten Sie einige Sekunden ab, bevor Sie sie benutzen, damit Sie sich nicht verbrennen. Sie können die Zahnbürste auch kurz unter kaltes Wasser halten.
- 6** Ihre Zahnbürste ist jetzt steril. Sie können sich nun die Zähne putzen.

Pierre Fabre
ORAL CARE

www.elgydium.ch

Pierre Fabre Pharma AG • Hegenheimer mattweg 183 • 4123 Allschwil
Tel: 061 487 88 88 • oralcare.ch@pierre-fabre.com

 **ELGYDIUM**
Eludril

*Bewertung der Dekontaminationswirkung von Mikrowellen auf die Zahnbürsten **ELGYDIUM CLINIC**. Auf Teststämmen der bakteriellen Mundflora. Fondrephar, Toulouse, September 2012

Zahnbürsten

ELGYDIUM *CLINIC* 7/100 und 15/100

postoperativ und chirurgisch

Ihr/e Zahnspezialist/in hat Ihnen die **ELGYDIUM *CLINIC***-Zahnbürste empfohlen. Folgende Vorteile haben ihn/ sie überzeugt:




Schmaler abgerundeter Kopf

Für eine leichte Erreichbarkeit aller Stellen im Mund



Schutzkappe

Für eine saubere Aufbewahrung

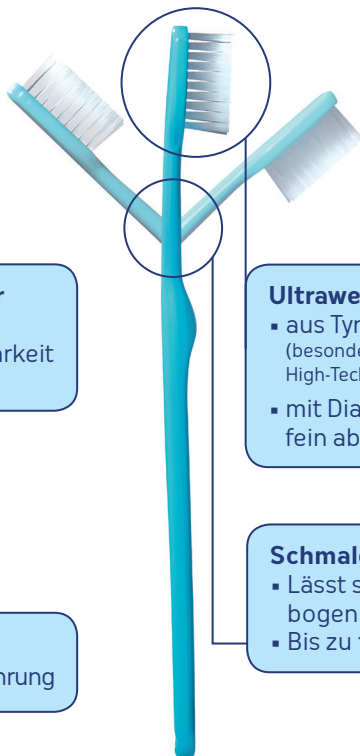

Ultraweiche Borsten

- aus Tynex® (besonders hygienisches und resistentes High-Tech-Nylon)
- mit Diamant-Schleifstein fein abgerundet

Schmaler und biegbarer Hals

- Lässt sich jedem Zahnbogen anpassen
- Bis zu 1'500 x biegbar



ELGYDIUM *CLINIC* 7/100 postoperativ

Zum sanften Massieren des Zahnfleisches nach einem Eingriff
Auch nach Implantationen
Ultraweich



ELGYDIUM *CLINIC* 15/100 chirurgisch

Für eine behutsame Rückkehr zum gewohnten Zähneputzen

Weich

Pierre Fabre
ORAL CARE

www.elgydium.ch