

ELGYDIUM CLINIC

Notre science au service de la santé bucco-dentaire

INNOVATION

Élimination des bactéries à domicile:


Stérilisation des brosses à dents **ELGYDIUM CLINIC** au micro-ondes

Pour éviter tout risque de recontamination lors de la cicatrisation et pour une hygiène impeccable, Pierre Fabre ORAL CARE a mis au point un système de stérilisation exclusif.

Procédé exclusif aux brosses à dents **ELGYDIUM CLINIC**

Possible sur toutes les brosses **ELGYDIUM CLINIC**

Un passage de **1 mn** de la brosse à dents **ELGYDIUM CLINIC** au **micro-ondes** à une puissance **minimale de 600 W** en présence d'eau, permet une **réduction de plus de 99.99 % de la flore bucco-dentaire** déposée sur la brosse à dents.*

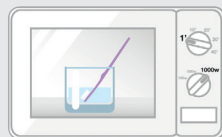

Mode d'utilisation:

- 1 Rincez votre brosse à dents **ELGYDIUM CLINIC** sous l'eau du robinet.
- 2 Plongez la tête de votre brosse dans un verre d'eau. L'intégralité de la tête doit être immergée dans l'eau.
- 3 Placez le verre au micro-ondes, à au moins 600 W, pendant 1 mn.
- 4 Attendez quelques instants avant de manipuler le verre, afin que ce dernier refroidisse.
- 5 Retirez la brosse à dents **ELGYDIUM CLINIC** du verre, attendez quelques secondes avant de l'utiliser, afin d'éviter tout risque de brûlures. La brosse pourra être rincée sous l'eau froide avant utilisation.
- 6 Votre brosse à dents est parfaitement stérile. Vous pouvez donc procéder au brossage.

Pierre Fabre
ORAL CARE

www.elgydium.ch

Pierre Fabre Pharma AG • Hegenheimermattweg 183 • 4123 Allschwil
Tél: 061 487 88 88 • oralcare.ch@pierre-fabre.com

 **ELGYDIUM**
Eludril

*Évaluation de l'efficacité décontaminante des micro-ondes sur les brosses à dents **ELGYDIUM CLINIC**.
Étude réalisée sur souches test de la flore bactérienne bucco-dentaire. Fondrephar, Toulouse sept. 2012

Brosses à dents **ELGYDIUM CLINIC 7/100 et 15/100** postopératoire et chirurgicale

Votre spécialiste bucco-dentaire vous a recommandé la brosse à dents **ELGYDIUM CLINIC**. En voilà les raisons:




Tête fine et arrondie

Pour un accès facilité à tous les recoins de la bouche



Protège-tête

Pour une hygiène optimale

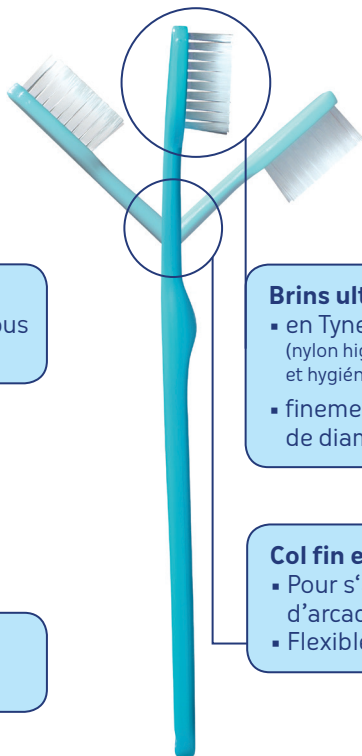

Brins ultra-doux

- en Tynex® (nylon high-tech spécialement résistant et hygiénique)
- finement arrondis à la meule de diamant

Col fin et flexible

- Pour s'adapter à tous types d'arcades
- Flexible jusqu'à 1'500 x



ELGYDIUM CLINIC 7/100 postopératoire

Après une intervention, pour un massage léger des gencives
Egalement après la pose d'implants
Ultra-souple



ELGYDIUM CLINIC 15/100 chirurgicale

Pour un retour progressif au brossage normal

Souple

Pierre Fabre
ORAL CARE

www.elgydium.ch